
# **Paktikumsanleitung**

## System anschalten

- 1. Steckdosenleiste anschalten
- 2. Rechner hochfahren
- 3. Vorn 2x USB anstecken
- 4. Per Gast-Account anmelden
- 5. Einmal auf linescan-Icon auf dem Desktop klicken
- 6. Warten

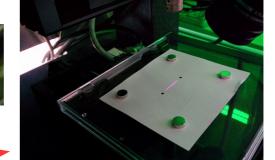


### Kalibrierung


- 1. Auf den Reiter Kaibrieren schalten
- 2. Kalibriertarget einlegen
- 3. Am Gerät mit dem Schlüssel den Laser anschalten
- 4. Auf 0° ausrichten und bestätigen
- 5. Am Gerät mit dem Schlüssel den Laser ausschalten
- 6. Toolbar Button für Kamera anklicken
- 7. Button für maximales Licht drücken
- 8. Kreise des Kalibriertagets am unteren Bildschirmrand auf 0° ausrichten
- 9. Bestätigen → Gerät führt automatisch Kalibrierung durch
- 10. Warten bis rote und gelbe Linien eingezeichnet werden
- 11. Alle Docks ausblenden, um das Bild in Originalgröße anzuzeigen
- 12. Nun muss ein Screenshot erstellt werden, dies geschieht durch drücken der »Druck«-Taste auf der Tastatur. Das Bild auf der Festplatte speichern.


#### Bildaufnahme und Messung durchführen

- 1. Den Butten für Default-Licht anklicken
- 2. Am Gerät mit dem Schlüssel den Laser anschalten
- 3. Auf den Reiter für Messung wechseln
- 4. Messobjekt ins Gerät einlegen
- 5. Das Linien-Dock öffnen (Butten mit der Taschenlampe)
- 6. Durch Klick auf den »Bild speichern«-Button jeweils einmal das Originalbild und das Linienbild speichern.



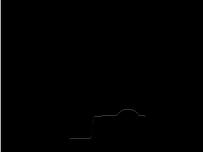

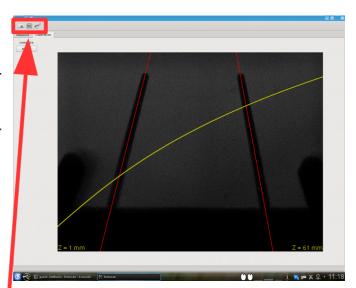


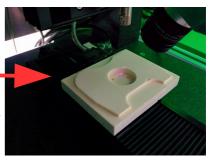

7. Den Dateimanager Dophin öffnen und ggf. dort auf "Persönlicher Ordner" klicken

8. Prüfen ob die beiden PNG-Dateien in diesem Verzeichniss liegen




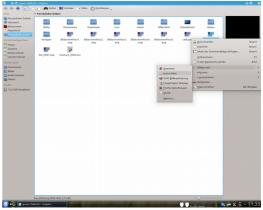

9. Den Button für »Messung starten« anklicken und warten

11. Ein Klick auf die Datei öffnet sie im Texteditor.


12. Die Y-Koordinate entspricht genau der Y-Koordinate vom Verschiebetisch, daher können die 3D-Punkte anhand dieser sehr leicht jeweils einer Linienbildaufnahme zugeordnet werden. Solange die Y-Koordinate also 0 ist, gehören die Punkte zur ersten Messposition und somit zu dem Linienbild, dass zuvor von uns gespeichert wurde. Die 3D-Punkte entsprechen im Linienbild den 2D-Punkten von links nach rechts.

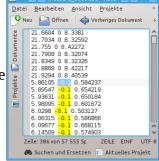

#### Messergebniss anschauen


- 1. Desktop-Menüleiste → Menü → Grafik → MeshLab
- 2. File → Import Mesh: \*.asc-Datei auswählen
- 3. In der Toolbar auf den Button für die Punktansicht schalten:



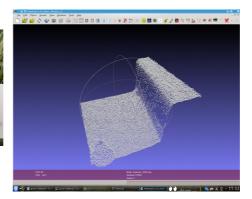


#### Linienbild manuell auswerten

 In Dophin den Screenshot von der Kalibrierung mit KolourPaint öffnen

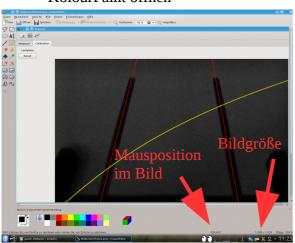


2. Das Bild so zuschneiden, dass nur die Kalibrierung zu sehen ist. Sollte eine Bildgröße

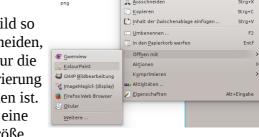


von 1024x768 haben, zu erkennen in der Statuszeile → Speichern

- 3. Linienbild ebenfalls mit KolourPaint öffnen
- 4. Mittels KolourPaint im Linienbild die xy-Position des von links bzw. rechts ersten Pixels ermitteln
- 5. (Hinweis: Im Startmenü unter Büroprogramme liegt die Tabellenkalkulation LibreOffice Calc, welche für die Auswertung verwendet werden kann)

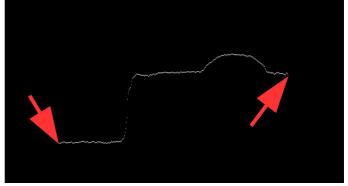

- 6. Anhand der Formeln aus der Bedienungsanleitung zum Gerät können beide Punkte in 3D-Koordinaten umgerechnet werden. (Hinweis: Da sich der Verschiebetisch bei der ersten Aufnahme noch nicht bewegt hat, sind alle MCL-Koordinaten 0.)
- 7. Die berechneten 3D-Punkte sollten in der .asc Datei annährend mit dem ersten Punkt bzw. dem letzten, bei dem Y = 0 ist übereinstimmen.

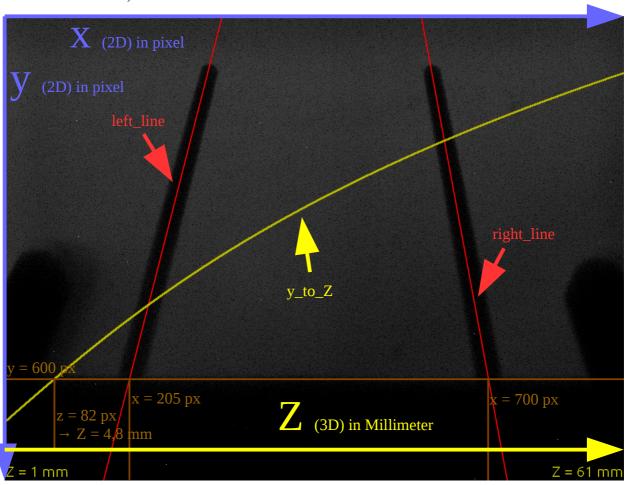

Bsp: Punkt aus Linienbild bei (x = 350px, y = 600px)